

TOURNIQUET AMPHIBIE



Le Tourniquet Amphibie est un garrot portable spécialement conçu pour être utilisé dans l'eau. Parfait pour diverses activités maritimes : plongée, bateau, pêche sous-marine...

AVANTAGES

- Portable
- Compact, léger et résistant
- Conçu pour résister à l'eau salée
- Pièces résistantes à la corrosion
- Dispositif d'auto-verrouillage
- Charge maximale du cliquet : 272 kg
- Instructions sur l'extérieur du garrot pour une meilleure lisibilité

TAILLES

- Régulier : 45,7 cm (longueur rangé) / 96,5 cm (longueur allongé)
- Mini : 38,1 cm (longueur rangé) / 73,6 cm (longueur allongé). Circonférence réduite pour les personnes ayant des membres plus fins.

POURQUOI EMPORTER UN TOURNIQUET

- 75% des tourniquets improvisés échouent à accomplir leur mission
- Vous pouvez saigner à mort en à peine 3 minutes
- Vous pouvez perdre connaissance en quelques secondes à cause de l'hémorragie
- Taux de survie de 96% si le garrot est appliqué avant le choc
- Taux de survie de 89% si le garrot est appliqué avant l'hôpital

contact@pc-equipment.fr


Tél : +33 (0)6 78 01 77 44 - www.pc-equipment.fr



INSTRUCTIONS

1. Tirez fermement / 2. Fixez le velcro / 3. Soulevez le cliquet

ETAPE 1

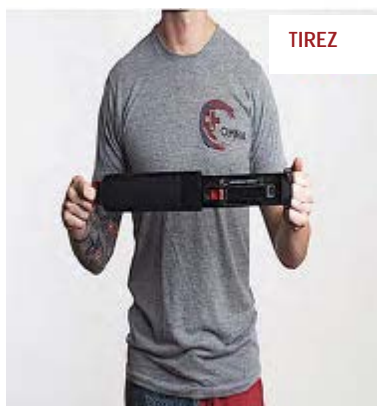

ETAPE 1 SUIITE



ETAPE 1 SUIITE




Pour 1 application d'une seule main, utilisez la sangle prévue à cet effet


ETAPE 1 SUIITE



ETAPE 2

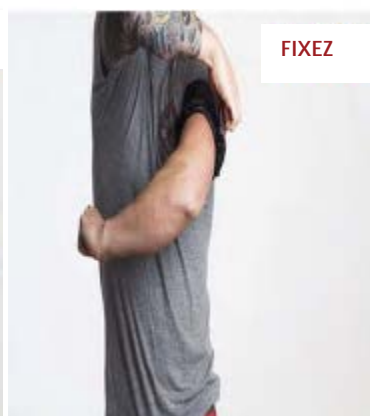

ETAPE 2

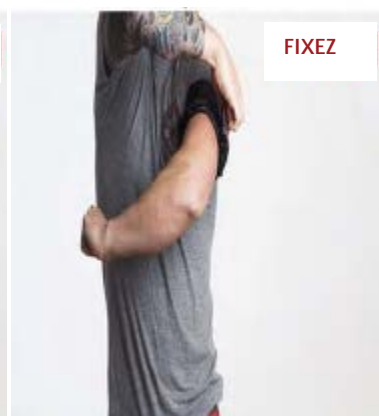

ETAPE 3



POST APPLICATION



Pouls distal éliminé

contact@pc-equipment.fr

Tél : +33 (0)6 78 01 77 44 - www.pc-equipment.fr

